



SAFE | EFFECTIVE | TRACEABLE

Amaro. 



www.amaro.cl



Amaro Forest *SL8500*

Configuración estandar

2 Jeringa Triple	2pcs
Lampara de tratamiento	1set
24V Negatoscopio LED	1set
Sistema de agua destilada	1set
Sistema llenado de vaso/salivero	1set
Sillón dental accionado por motor	1set
Taburete Doctor SL8500-1	1set
Eyector de saliva y hemoaspirador	1set
Bandeja de instrumentos	1set
Pedal Neumatico	1set

Opcional

scaler incorporado al equipo	1set
Lampara fotocurado al equipo	1set
Tubina NSK	1set
Micromotor NSK	1set
Sistema intra oral	1set
Taburete de asistente	1set
Sitema de bracket colibrí	1set
Sitema de ambidiestro	1set

6-LEDs Lámpara Dental

Equipado con interruptores dobles sensibles a los botones, que pueden cambiar entre luz cálida/fría/ cálida y fría y ajustar la intensidad de forma continua.



Teclado de control principal

El panel de botones simple hace que la operación sea más fácil de usar.



Brazo de conexión de la bandeja de instrumentos

El brazo está conectado debajo del asiento, lo que hace que el centro de gravedad sea más estable. El brazo transversal no cruza el asiento, lo que puede reducir la sensación de depresión y miedo del paciente.



NOS CENTRAMOS MÁS EN EL DESARROLLO DE FUNCIONES PRÁCTICAS



Válvula de presión diferencial de la pieza de mano

Válvula de control de presión diferencial para evitar fugas de agua de la pieza de mano causadas por una presión de aire insuficiente.



Válvula reguladora de presión pieza de mano

Asegura que la pieza de mano tenga suficiente presión y flujo de aire, proporcionando una potencia fuerte y continua para la pieza de mano.



Sillón con función de sincronización

El cojín del asiento y el respaldo se mueven sincronizadamente, lo que hace que todo el proceso de tratamiento sea cómodo y seguro.



LA BASE ESTÁ FABRICADA EN ALEACIÓN DE ALUMINIO

La base de aleación de aluminio no se deforma, lo que hace que el sillón dental sea más sólido y menos propenso a sacudirse durante el tratamiento.

LAMPARA DENTAL



PEDAL



TABURETES



OTROS ACCESORIOS



Touch control panel



Linak motor
or T-motion




Light Cure




Scaler

COLORES TAPIZ




TAPIZ PU SIN COSTURA

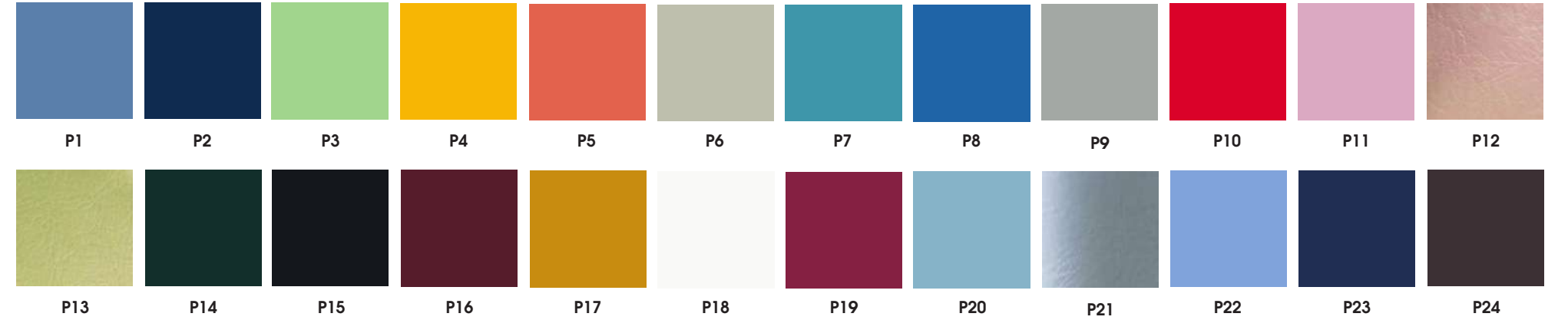

TAPIZ MICROFIBRA CON COSTURA

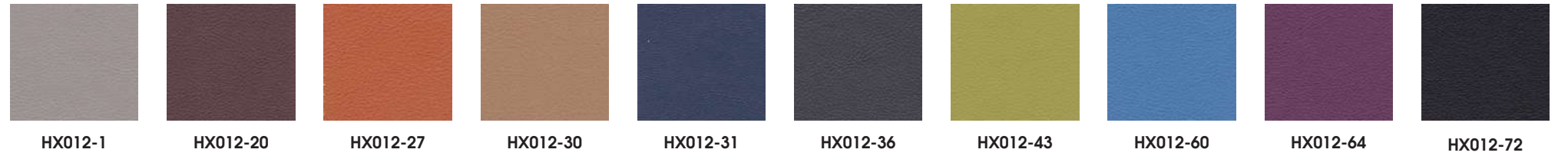

PLANO INSTALACION

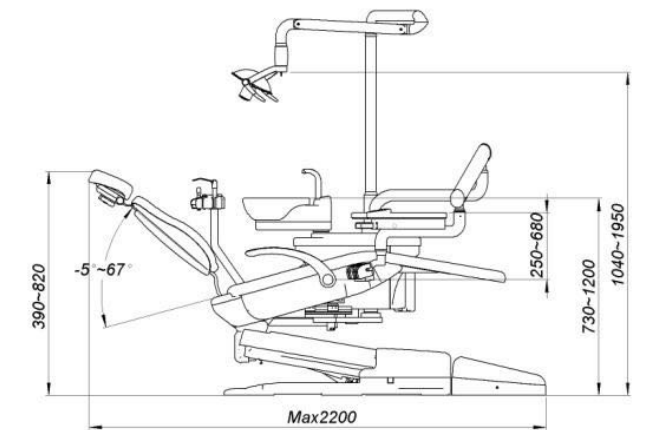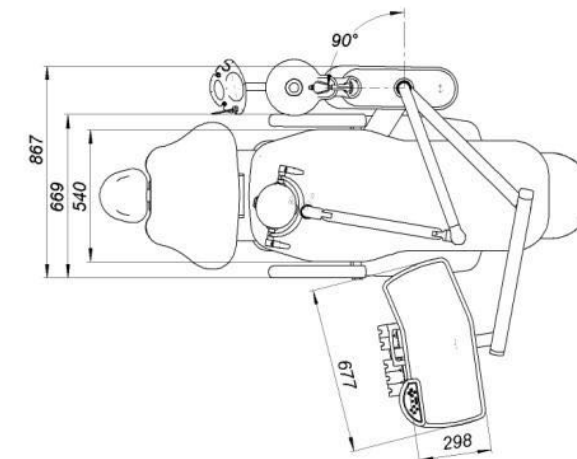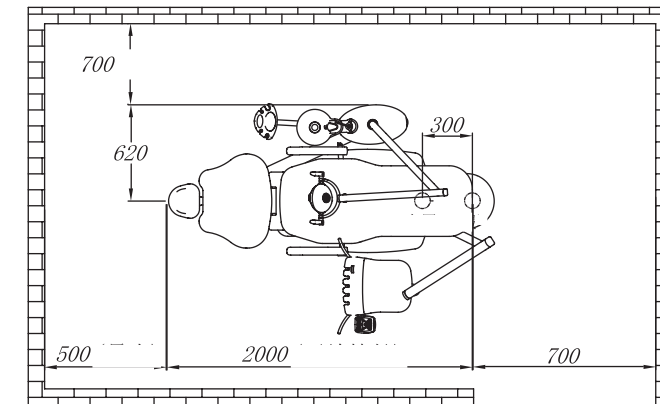



www.amaro.cl